


# Attends® Soft




Attends - les 10 degrés d'incontinence

Attends Soft est une gamme de protections anatomiques discrètes conçues pour gérer l'incontinence urinaire très légère à sévère.

Soft 0-3+

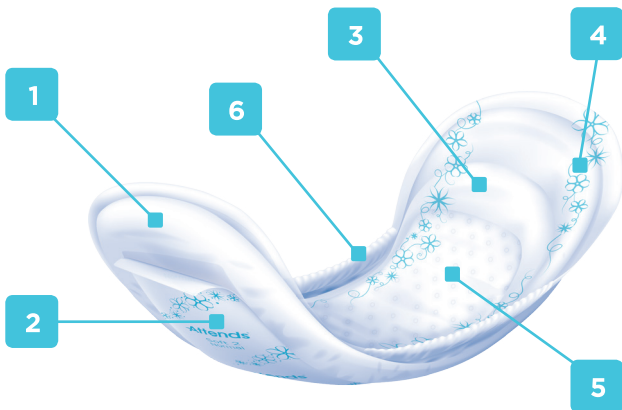

Soft 4-7

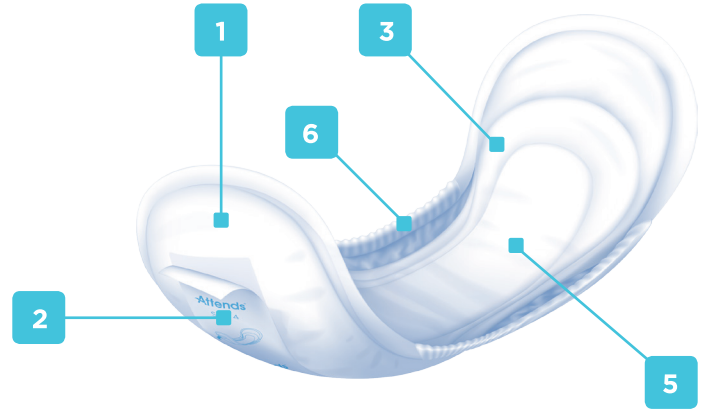

- |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Un voile extérieur blanc micro-aéré favorisant la rétention du liquide, pour améliorer le confort, la sensation de discrétion et la santé de la peau.</p>        | <p><b>2</b> Des adhésifs qui permettent de porter le produit avec des sous-vêtements bien ajustés pour une fixation pratique et pour plus de discrétion.</p>                      | <p><b>3</b> Noyau en forme anatomique pour un ajustement confortable.</p>                                                                             |
| <p><b>4</b> Voile intérieur très doux imprimé (Soft 0 - 3+) pour une douceur améliorée et un motif bleu* pour une apparence plus esthétique (*sauf emballage 30 pièces).</p> | <p><b>5</b> Noyau superabsorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimale.</p> | <p><b>6</b> Des barrières anti-fuites douces (Soft 2-7) adaptées à la morphologie permettent un maintien ajusté et réduisent le risque de fuites.</p> |



Les protections anatomiques Attends Soft sont testées et approuvées par ProDerm, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée.

Pour plus d'informations visitez

[www.attends.fr](http://www.attends.fr) [www.attends.be](http://www.attends.be) [www.attends.ch](http://www.attends.ch)

# Attends Soft

	Conditionnement sac / carton	EAN 732152 sac / carton	Longueur produit (cm) Largeur produit à l'entrejambe (cm)	Voile extérieure	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Elastiques	Adhésifs	Protection Odeur Naturelle	Respirable/micro-aéré	Technologie Quick-Dry
<b>Attends Soft Micro 0</b>	28 8	205266 205273	17.5 6	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Noyau micro-aéré en cellulose, superabsorbant et fibres synthétiques avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	X	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Ultra Mini 0</b>	28 8	205068 205075	20.5 6.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Noyau micro-aéré en cellulose, superabsorbant et fibres synthétiques avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	X	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Mini 1</b>	20 12	204542 205327	21.5 8	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbant avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	X	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Mini Long 1</b>	16 12	204566 204863	27.5 8	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbant avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	X	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Normal 2</b>	12 8	207239 207246	26.5 10.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
	30 6	208236 208243									
<b>Attends Soft Extra 3</b>	12 8	207253 207260	32.5 12	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
	30 6	208250 208267									
<b>Attends Soft Extra Plus 3+</b>	10 12	204665 205112	36.5 13	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft Super 4</b>	30 6	208274 208281	38.5 14.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
	46 3	204740 207673									
<b>Attends Soft 5</b>	38 4	204764 204771	47.5 16.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft 6</b>	38 4	204788 204795	47.5 16.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓
<b>Attends Soft 7</b>	34 4	204801 204818	47.5 16.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbants et couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	Elastiques en mousse	✓	✓	✓	✓



## Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le cœur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface. Elle peut recevoir plusieurs mictions sans que cela n'altère son pouvoir absorbant, ce qui garantit un maintien au sec et une protection contre les fuites exceptionnels.



## Protection Naturelle Anti-Odeurs

La Protection Naturelle Anti-Odeurs réduit le risque d'odeurs désagréables.



## Zone Active

La Zone Active est la partie centrale de la protection avec une importante capacité d'absorption à l'endroit où il y en a le plus besoin. Ceci permet un maintien au sec de la peau exceptionnel et une meilleure protection contre les fuites pour l'utilisateur.



## Voile de Surface Ultra Doux

Voile de surface ultra doux, respectueux de la peau.



## pH Respectueux de la Peau

La combinaison de la technologie Quick-Dry et du cœur ultra absorbant garantit un pH faible, proche de celui de la peau, ce qui permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé.



## Micro-aéré

Le voile externe micro-aéré toucher textile permet à la peau de respirer, ce qui contribue au maintien d'une peau saine.



## Emballage individuel

Les produits sont emballés individuellement pour plus d'hygiène et de discrétion. (sauf emballage 30 pièces).