


# Attends® Cover-Dri



Attends Cover-Dri est une gamme d'âlèses pour la protection des surfaces en cas d'incontinence urinaire légère à modérée, et pendant des examens médicaux où une absorption stérile n'est pas requise.

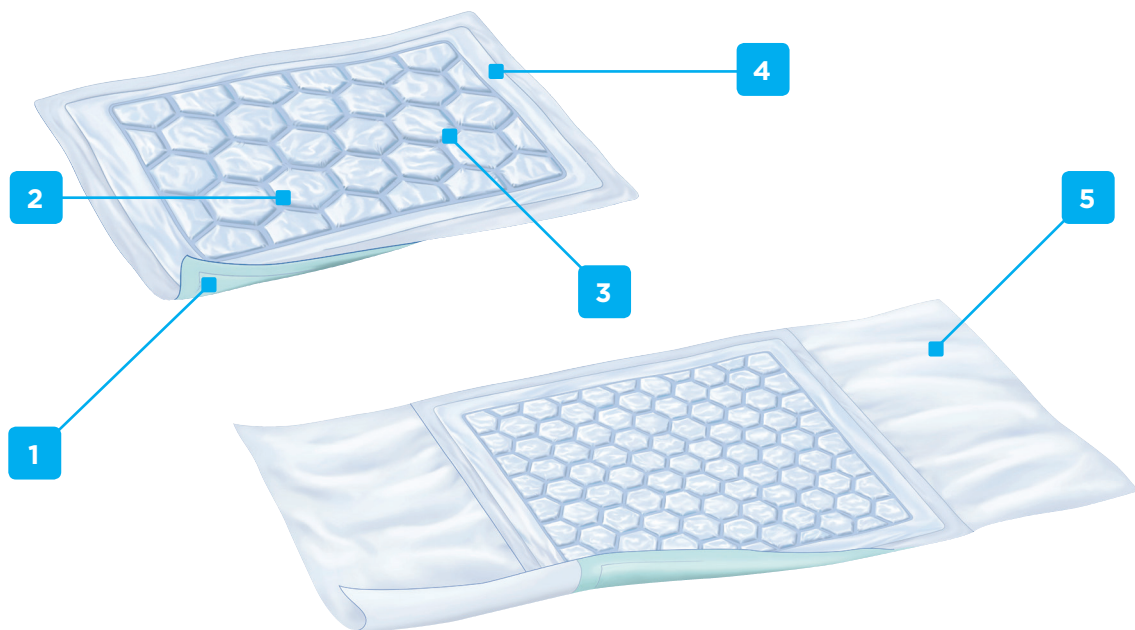

- 1** Voile extérieur coloré discrètement, imperméable et antidérapant pour assurer un bon maintien en place du produit.
- 2** Des coussinets individuels absorbants drainent rapidement le liquide et les rainures médiatrices conduisent le liquide aux coussinets suivants, limitant ainsi le risque pour le liquide de «stagner».
- 3** Noyau superabsorbant pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimales. Attends Cover-Dri Special Care (soins spéciaux) n'a pas de superabsorbant et est conçu pour absorber rapidement des grandes quantités de liquide.
- 4** Barrière anti-fuites tout autour réduit le risque de fuites.
- 5** Le modèle bordable Attends Cover-Dri Plus 80 x 170 cm à rabats assure une meilleure fixation de l'âlèse au lit.

Pour plus d'informations visitez  
[www.attends.fr](http://www.attends.fr) [www.attends.be](http://www.attends.be) [www.attends.ch](http://www.attends.ch)

## Attends Cover-Dri

	Conditionnement sac / carton	EAN 732152 sac / carton	Voile extérieure	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Rabats bordables	Protection Odeur Naturelle
Attends Cover-Dri Plus 40x60cm 	50 6	203903 203910	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x60cm 	50 4	203927 203934	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x90cm 	50 4	203965 203972	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x90cm* 	30 4	204009 204016	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x170cm 	30 4	204023 204030	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	✓	✓
Attends Cover-Dri Super 60x60cm 	50 4	203941 203958	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Super 60x90cm 	50 4	203989 203996	Film polyéthylène	Cellulose et superabsorbant	Non- tissé	X	✓
Attends Cover-Dri Special Care 60x60cm* 	38 4	203293 203309	Film polyéthylène	Cellulose	Non- tissé	X	X

\* pas disponible en Suisse



### Protection Naturelle Anti-Odeurs (sauf Cover-Dri Special Care)

La Protection Naturelle  
Anti-Odeurs réduit  
le risque d'odeurs  
désagréables.



Les protections Attends Cover-Dri sont  
testées et approuvées par proDERM,  
Institut Indépendant de Recherche  
Dermatologique Appliquée.