


Attends® Contours Air Comfort



Attends - les 10 degrés d'incontinence

Attends Contours Air Comfort est une gamme des protections anatomiques spécialement conçues pour gérer l'incontinence urinaire sévère et/ou fécale.

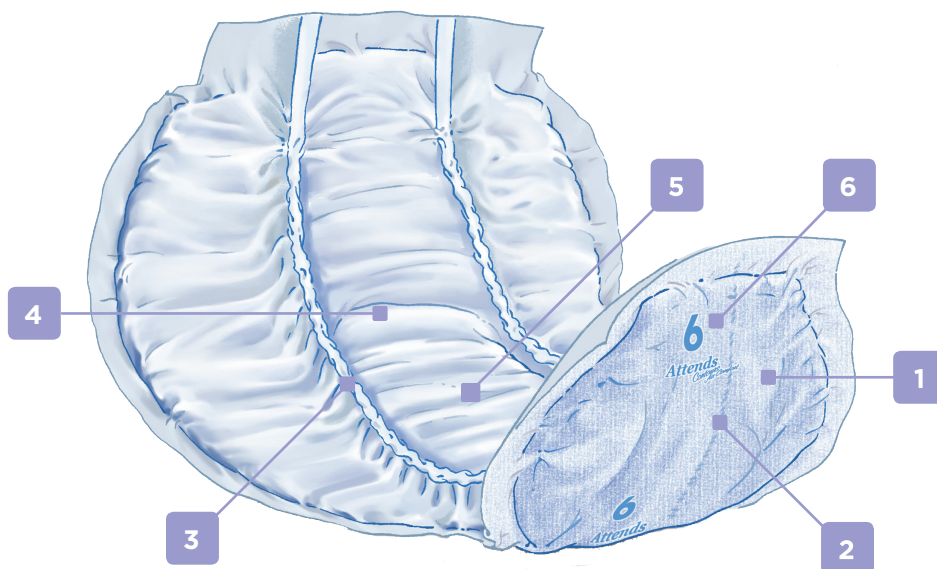

- 1 Un voile extérieur blanc toucher textile favorisant la rétention du liquide, pour améliorer le confort et la sensation de discrétion.
- 2 Un indicateur d'humidité qui aide à la bonne pratique des soins et qui disparaît au fur et à mesure de la saturation: ainsi, il peut servir comme guide pour indiquer quand il faut changer la protection.
- 3 Barrières anti-fuites (Contours Air Comfort 6 - 10) pour une meilleure protection contre les fuites.
- 4 Noyau en forme anatomique pour un ajustement confortable.
- 5 Noyau super absorbant avec couche d'acquisition pour une meilleure protection contre les fuites, une sécheresse de la peau et une protection anti-odeurs optimales.
- 6 Le niveau d'absorption du produit est imprimé sur la bande de fixation (Contours Air Comfort 4 et 5) et sur le voile extérieur (Contours Air Comfort 6 - 10) pour faciliter l'identification des produits dans les maisons de repos.

Pour plus d'informations visitez

www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch

	Conditionnement sac / carton	EAN 7332152 sac / carton	Longueur produit (cm) Largeur produit à l'entrejambe (cm)	Voile extérieur	Noyau d'absorption	Voile supérieur	Elastiques	Barrières anti-fuites	Bandes de fixation	Protection Odeur Naturelle	Respirable micro-aéré	Technology Quick-Dry
Attends Contours Air Comfort 4	42 5	203743 203750	39 16	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 5	42 5	205235 205242	50 21	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 6	35 4	203781 203798	58 17.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 7	28 4	203804 203811	58 17.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 8	28 4	203828 203835	64.5 19	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 9	28 4	203842 203859	70 19.5	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Cellulose et superabsorbants avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Attends Contours Air Comfort 10	21 4	205549 205556	78.5 25	Stratifié avec du non-tissé et film respirable	Système double noyau avec cellulose et superabsorbent, avec couche d'acquisition Quick-Dry	Non-tissé	✗	✓	✗	✓	✓	✓



Quick-Dry

La technologie Quick-Dry est utilisée dans la couche d'acquisition située directement sous le voile de surface. Elle capte et draine rapidement le liquide loin de la peau vers le cœur ultra absorbant de la protection et empêche son retour vers la surface. Elle peut recevoir plusieurs mictions sans que cela n'altère son pouvoir absorbant, ce qui garantit un maintien au sec et une protection contre les fuites exceptionnels.



pH Respectueux de la Peau

La combinaison de la technologie Quick-Dry et du cœur ultra absorbant garantit un pH faible, proche de celui de la peau, ce qui permet de protéger la peau et de la maintenir en bonne santé.



Micro-aéré

Le voile externe micro-aéré toucher textile permet à la peau de respirer, ce qui contribue au maintien d'une peau saine.



Protection Naturelle Anti-Odeurs

La Protection Naturelle Anti-Odeurs réduit le risque d'odeurs désagréables.



Les protections anatomiques Attends Contours Air Comfort sont testées et approuvées par proDERM, Institut Indépendant de Recherche Dermatologique Appliquée.